

VIOLAZER



360°  
Cool Pro

4 BAŞLIK AYNI ANDA ÇALIŞMA İMKANI  
SOĞUK LİPOLİZ TEKNOLOJİSİ

CE 0123 TUV ISO 13485

violazer.com

## Cool Pro Soğuk Lipoliz Cihazı'nı Farklı Kılan Nedir?

### Ameliyatsız Yağ Parçalama Olanığı

Cool Pro Soğuk Lipoliz cihazı ile yağlardan kurtulmak cerrahi olmayan bir yöntemdir. Yağ hücreleri, soğuğa karşı direncinin az olmasından dolayı sıfırın altına kadar soğuyan yağ hücreleri uygulama sonrası kan ve lenf dolaşımı yoluyla vücuttan uzaklaştırılır.

### Konforlu Yağ Parçalama Yöntemi

Cool Pro Soğuk Lipoliz Cihazı başlıkları uygulama yapılacak alana yerleştirilir. Sonrasında 1 saat süren işlem sırasında ağrı veya acı hissedilmez.

### Vücutunuz Şekillendirin

Cool Pro Soğuk Lipoliz Cihazı ile fazla yağdan şikayetçi olduğunuz vücut bölgenizi yeniden şekillendirin. Seanslar ilerledikçe vücut hatlarınızdaki değişimi daha farkedilir bir görünüm kazanacaktır.




- ✓ 4 başlık aynı anda çalışabilme imkanı
- ✓ Başlığa entegre peltier soğutma sistemi ile -11C soğutma
- ✓ Servise ihtiyaç duymadan filtre temizleyebilme imkanı
- ✓ 360° soğutma teknolojisi ile her noktada eşit ısı dağılımı

## Soğuk Lipoliz Yağları Nasıl Parçalar ?

Soğuk lipoliz uygulamasında kullanılan soğutucu başlıklar, yağlı bölgeyi içine vakum yardımıyla çekerek ortalama 1 saat boyunca soğutur. Başlık içinde ısı -10 C'ye düşen plakalara temas eden cilt hızlı bir soğuma içine girer. Uygulama neticesinde, yağ hücreleri, soğuk nedeniyle apoptosis denilen hücre yıkımına uğrayarak vücuttan zamanla kan ve lenf dolaşımı ile uzaklaştırılır.

## Cool Pro Etki Mekanizması

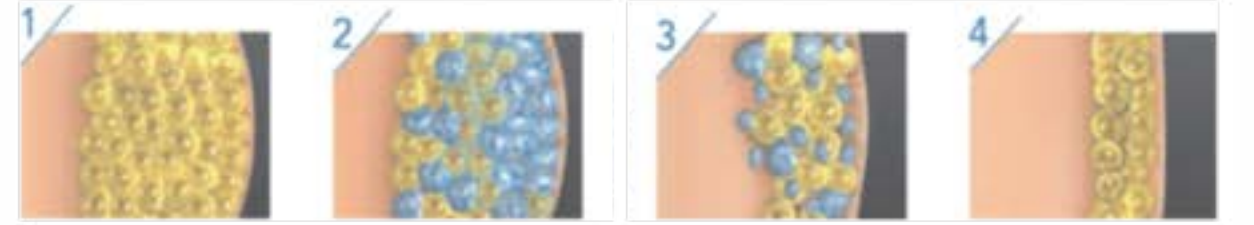

- ✓ Egzersiz ve diete rağmen birçok insanda bölgesel yağlanma oluşur.
- ✓ Cool Pro problemlili bölgeyi soğutarak yalnızca yağ hücrelerinin soğuk yoluyla ber taraf edilmesini sağlar.
- ✓ Uygulamayı takip eden haftalar ilerledikçe, yağ hücreleri vücuttan atılma işlemi sürer.
- ✓ Atılım işlemi tamamlandığında vücut hattı istenen ve beklenen durumuna kavuşur.

Cool Pro ile uygulama sonrasında ilk sonuçlar 2-3 hafta içinde görülmeye başlar. Nihai sonuçlar ise uygulamanın 2 ay sonrasında görülür.

Tamamen acısız ve cerrahi olmayan bir yöntem olan ile soğuk lipoliz uygulaması ile bölgesel olarak depolanmış ve kötü bir dış görünüm yaratan yağ dokusunun vücuttan uzaklaştırılması sağlanır.



## Soğuk Lipoliz Teknolojisinde Cool Pro Cihazı ile Farkı Yaşayın



### Soğuk Lipoliz Kimlere uygulanabilir ?

- Vücudun çeşitli yerlerinde tüm çabalara ve doğal yöntemlere rağmen erimeyen bölgeleri olanlar.
- Cerrahi müdahaleden çekinen kimseler
- Liposuction gibi cerrahi yöntemler için zaman ve para ayırmak istemeyen kimseler
- Cerrahi müdahale sonrasında günlük yaşantıda olabilen problemleri yaşamak istemeyen kimseler

### Öncesi ve Sonrası



Öncesi

Sonrası

Öncesi

Sonrası

Öncesi

Sonrası

### Teknik Özellikler

Infrared Işık	37-42
Soğutma Derecesi	5 - (-11)
Vakum	10-80 kPa
LED Işıklar	Kırmızı (630nm), Yeşil (570nm), 50Mw x4
Başlık Ebadı	220x80mm & 160x60mm & 130x50mm & 80x40mm )*40mm
56 kg	56 kg



+90 224 532 03 20  
+90 535 827 66 37  
+09 535 654 37 73  
www.violazer.com